


HỆ THỐNG NUÔI CẤY BÁN NGẬP CHÌM

Model: Plantima - Nsx: Đài Loan

- Hệ thống chuyên nuôi cấy thực vật giúp cải thiện quá trình tự dưỡng và rút ngắn thời gian thích nghi khí hậu của thực vật

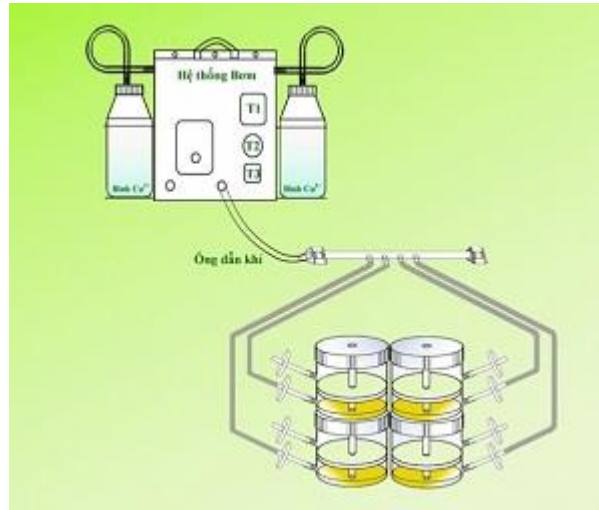

Hệ thống bao gồm:

- Hệ thống điều khiển: cài đặt thời gian điều khiển chu kỳ ngập và khoảng thời gian giữa các lần ngập
- Bơm nén khí tạo áp lực để hút môi trường từ ngăn chứa lên ngăn chứa cây
- Hệ thống ống dẫn và van điều khiển
- Các màng lọc
- Bình nuôi cấy thường bằng nhựa

Thông số kỹ thuật:

Hệ thống điều khiển:

- Thiết bị điều khiển lưu lượng và áp lực khí
- Bộ hẹn giờ cài đặt theo chu kỳ điều khiển thời gian ngập và khoảng thời gian giữa các lần ngập
- Có thể kết nối đến 50 bình nuôi cấy plantima
- Nguồn điện: 220V/60Hz

Bình nuôi cấy Plantima:

- Vật liệu polycarbonate, silicone, NBR, PC/PP có thể hấp được ở nhiệt độ 121°C, 15 psi, 20 min

- Tự động điều chỉnh áp suất khí, môi trường lỏng được đưa vào ngăn nuôi cấy tạo điều kiện ngập tạm thời, sau đó quay trở lại ngăn giữ chất lỏng

Một bộ bình nuôi cấy Plantima bao gồm: 01 bình chứa bằng polycarbonate; 01 O ring bằng NBR; 01 phễu hình quả lê bằng polycarbonate; 01 khay giữ bằng polypropylen; 01 nắp đậy bằng polycarbonate; 02 bộ lọc khí 0.45 µm bằng PC/PP; 01 ống silicone 15 cm; 10 miếng polypropylen

Cung cấp bao gồm:

- + Bộ điều khiển TIS điều khiển tới 50 Plantima
- + Bình Plantima
- + Bộ chia kênh dùng cho 04 Plantima
- + Ống nối (miễn phí)